
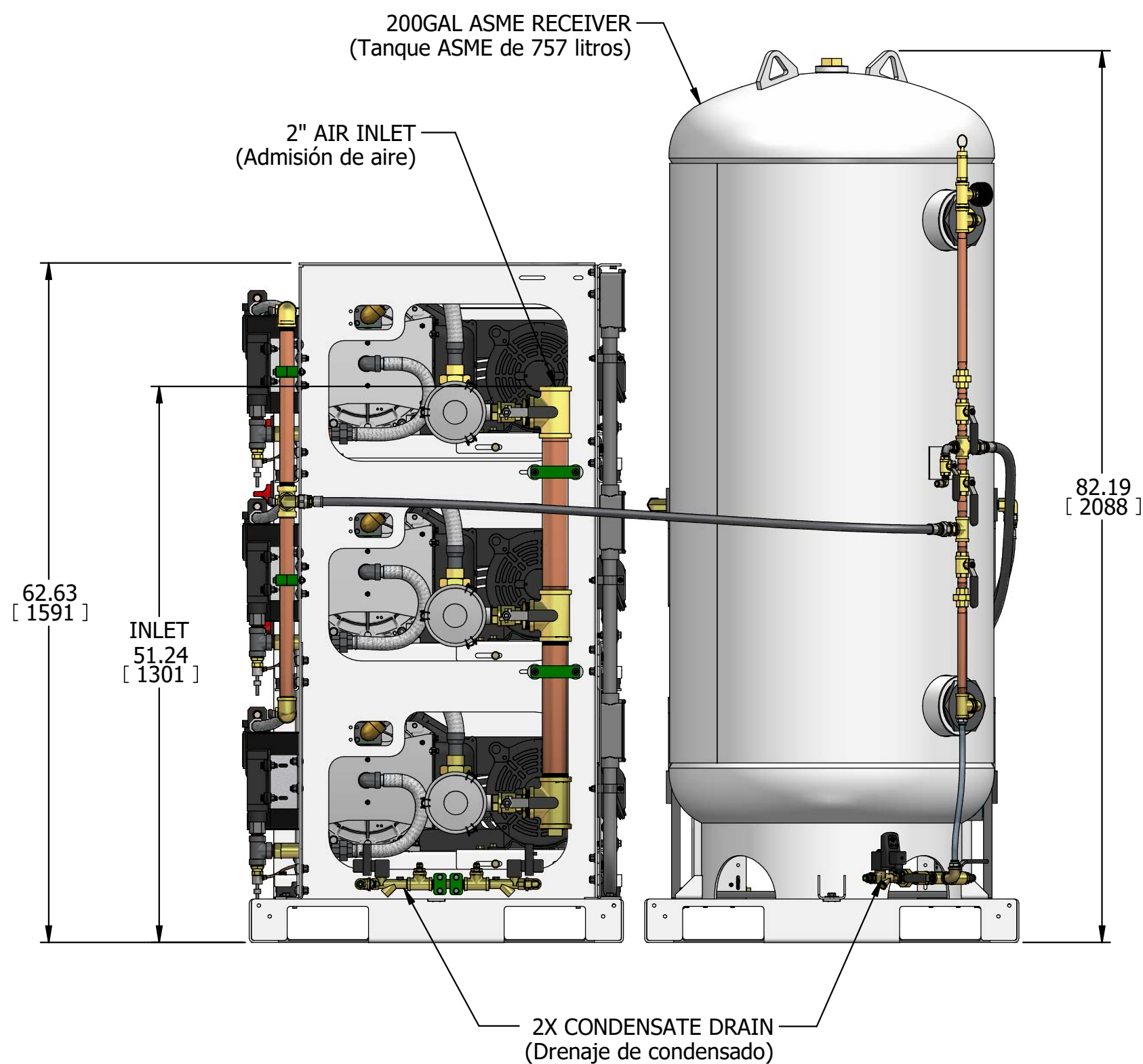
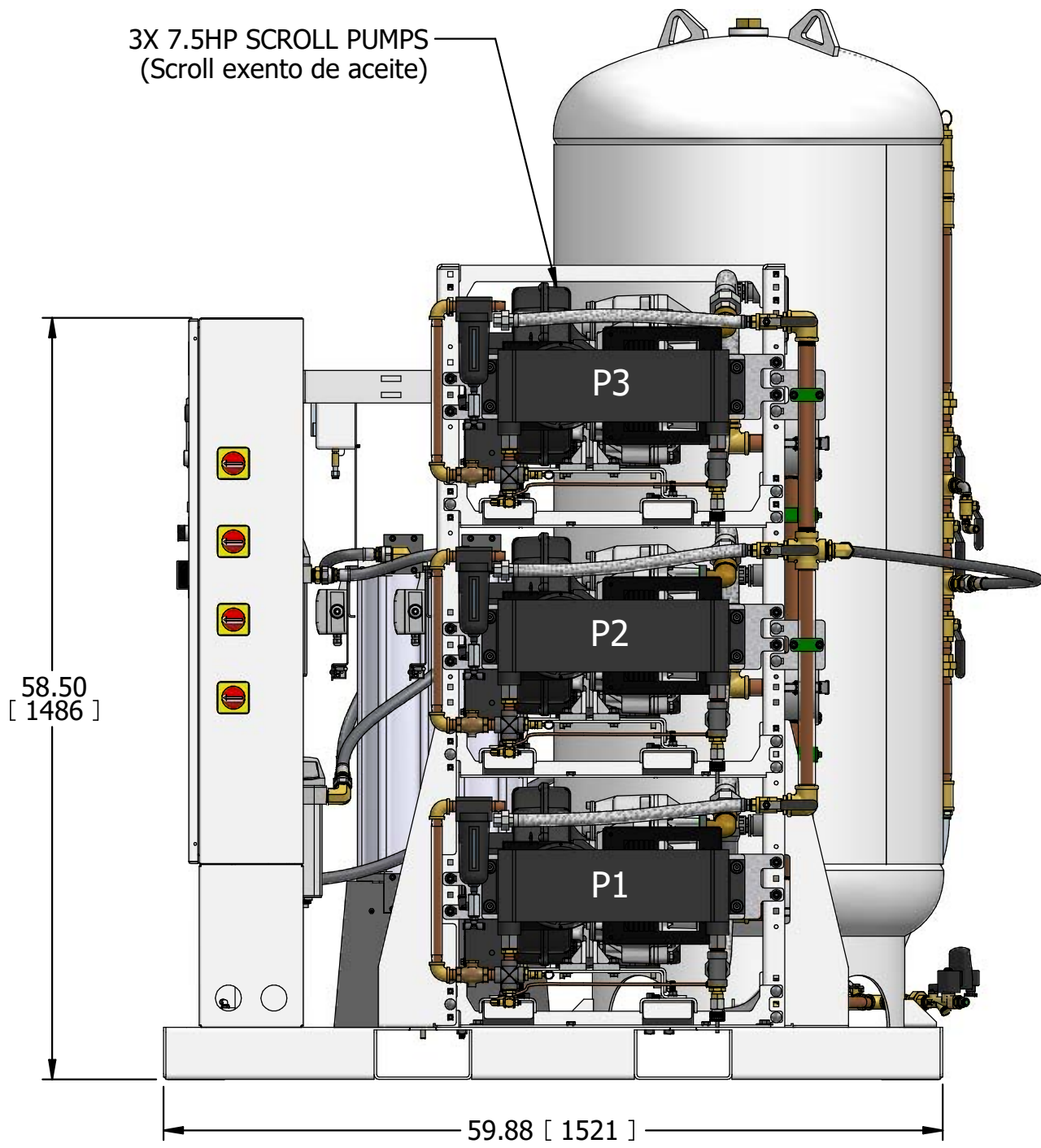
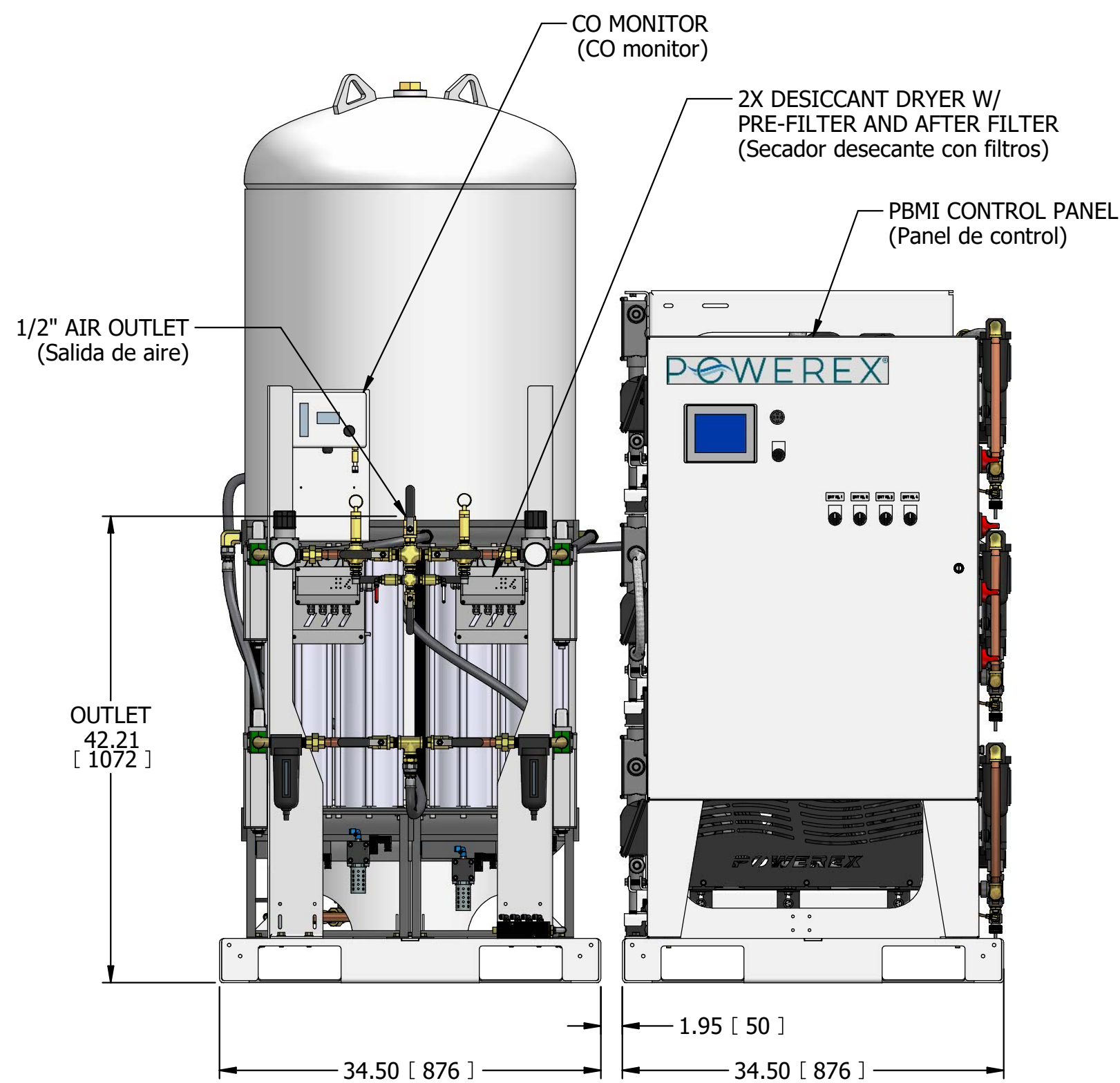
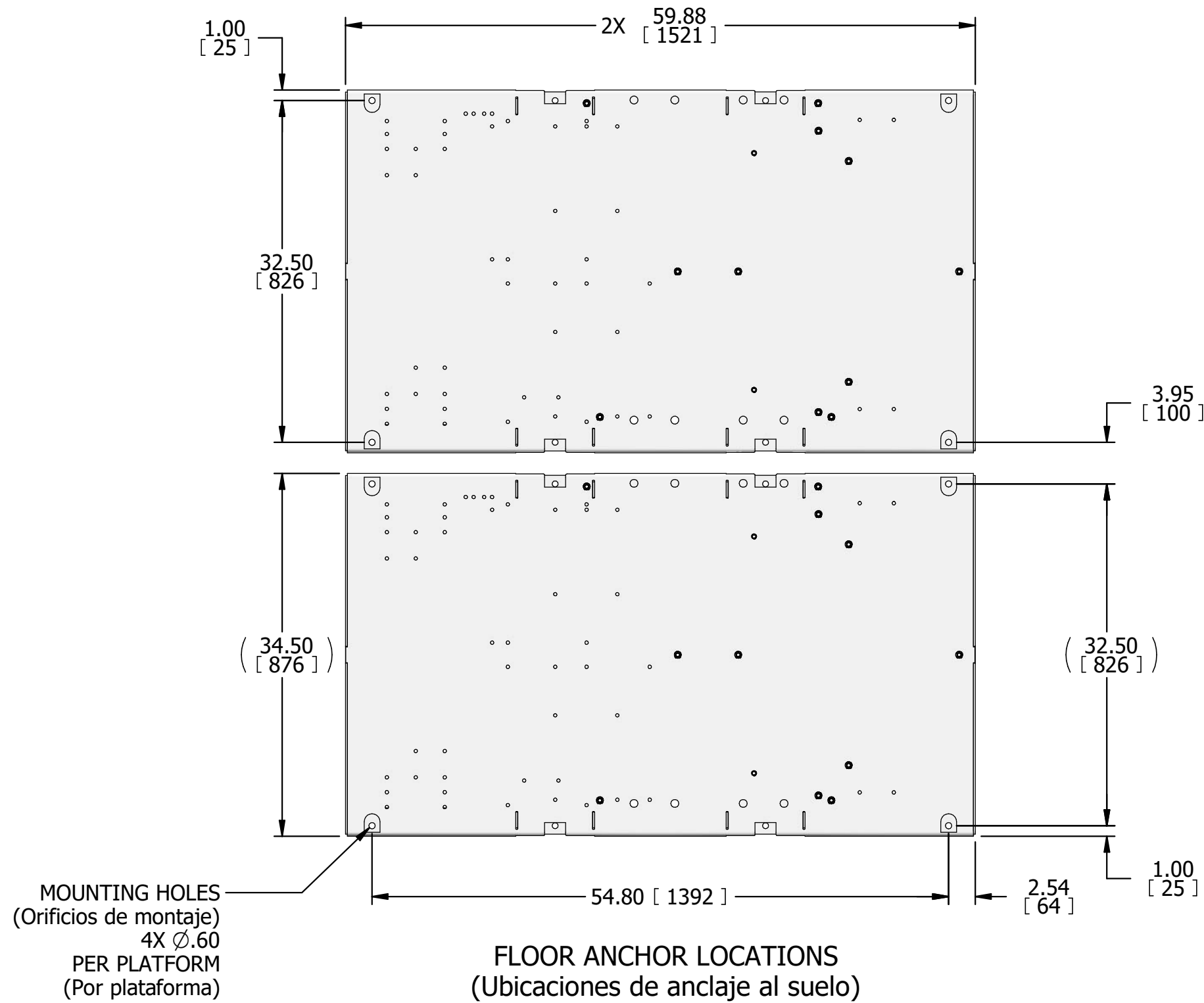


MST07C5xP5

7.5HP MED OPEN SCROLL TRIPLEX 200GAL DUPLEX DESICCANT

REVISION NOTES	
DESCRIPTION	ECN
PRODUCTION RELEASE	PXEC0318

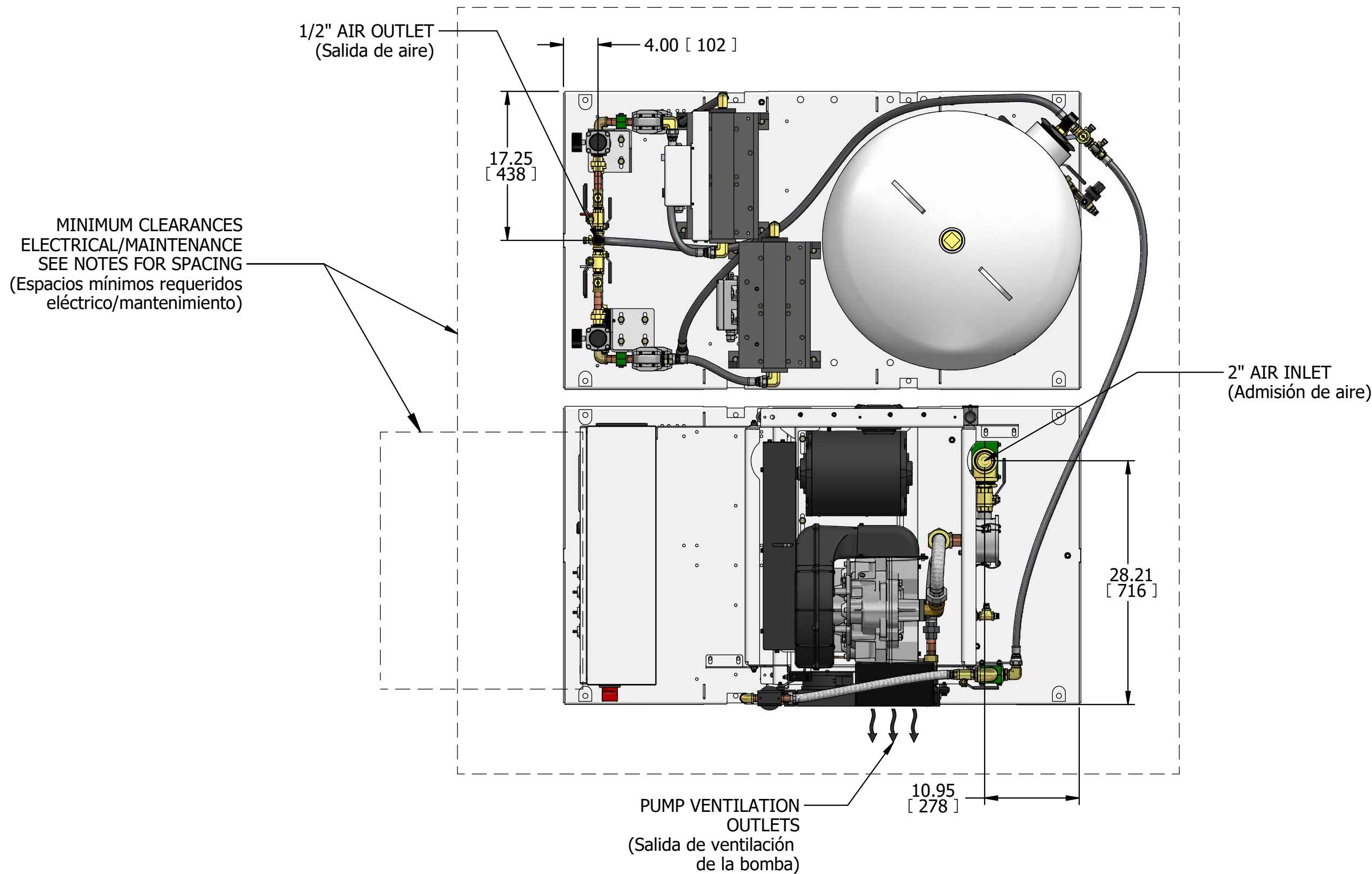


- NOTES:
1. APPROXIMATE WEIGHT: 2543 LBS
 2. A MINIMUM OF 24" CLEARANCE IS RECOMMENDED AROUND THE ENTIRE UNIT. CLEARANCE FOR CONTROL PANEL SHALL BE IN ACCORDANCE WITH OSHA/NEC REQUIREMENTS.
 3. SYSTEM DESIGNED IN COMPLIANCE WITH U.S. NFPA '99, LATEST EDITION.
 4. INLET AND OUTLET FLEX HOSES ADD 12" TO CONNECTIONS
1. PESO APROXIMADO: 1153 kg
2. RECOMENDAMOS QUE EL ESPACIO LIBRE ALREDEDOR DEL SISTEMA DEBE SER COMO MÍNIMO 24" (600 mm). EL ESPACIO LIBRE PARA EL TABLERO DE CONTROL DEBERÁ ESTAR DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA OSHA/NEC.
3. EL SISTEMA ESTÁ DISEÑADO DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA NFPA 99.
4. LAS MANGUERAS FLEXIBLES DE ENTRADA Y SALIDA AÑADEN 12" A LAS CONEXIONES

SYMBOL LEGEND		DRAWINGS TO CONFORM TO CURRENT REVISION OF THE FOLLOWING AND STANDARDS:		
		Y14.3 MULTI AND SECTIONAL VIEW DWGS		
		Y14.5 DIMENSIONING AND TOLERANCING		
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SOLID EDGE DRAWING	DO NOT SCALE DRAWING FOR DIMENSIONS	
0.XX ± .05				
0.XXX ± .005		INCH [mm]	SHEET 1 OF 2	
± .1			SCALE 1:1	
CONFIDENTIAL DISCLOSURE		AUTHOR		REVISION DATE
This drawing is the property of POWEREX INC. of HARRISON HOLDINGS, INC. and is subject to return on demand. Its contents are confidential and must not be copied or submitted to outside parties for use or examination.		Kumar,Sreehari		07/17/25
DRAWING NUMBER		REVISION		SIZE
7.5HP MED OPEN SCROLL TRIPLEX 200GAL DUPLEX DESICCANT		MST07C5xP5		B D

MST07C5xP5


7.5HP MED OPEN SCROLL TRIPLEX 200GAL DUPLEX DESICCANT

REVISION NOTES	
DESCRIPTION	ECN
PRODUCTION RELEASE	PXEC0318

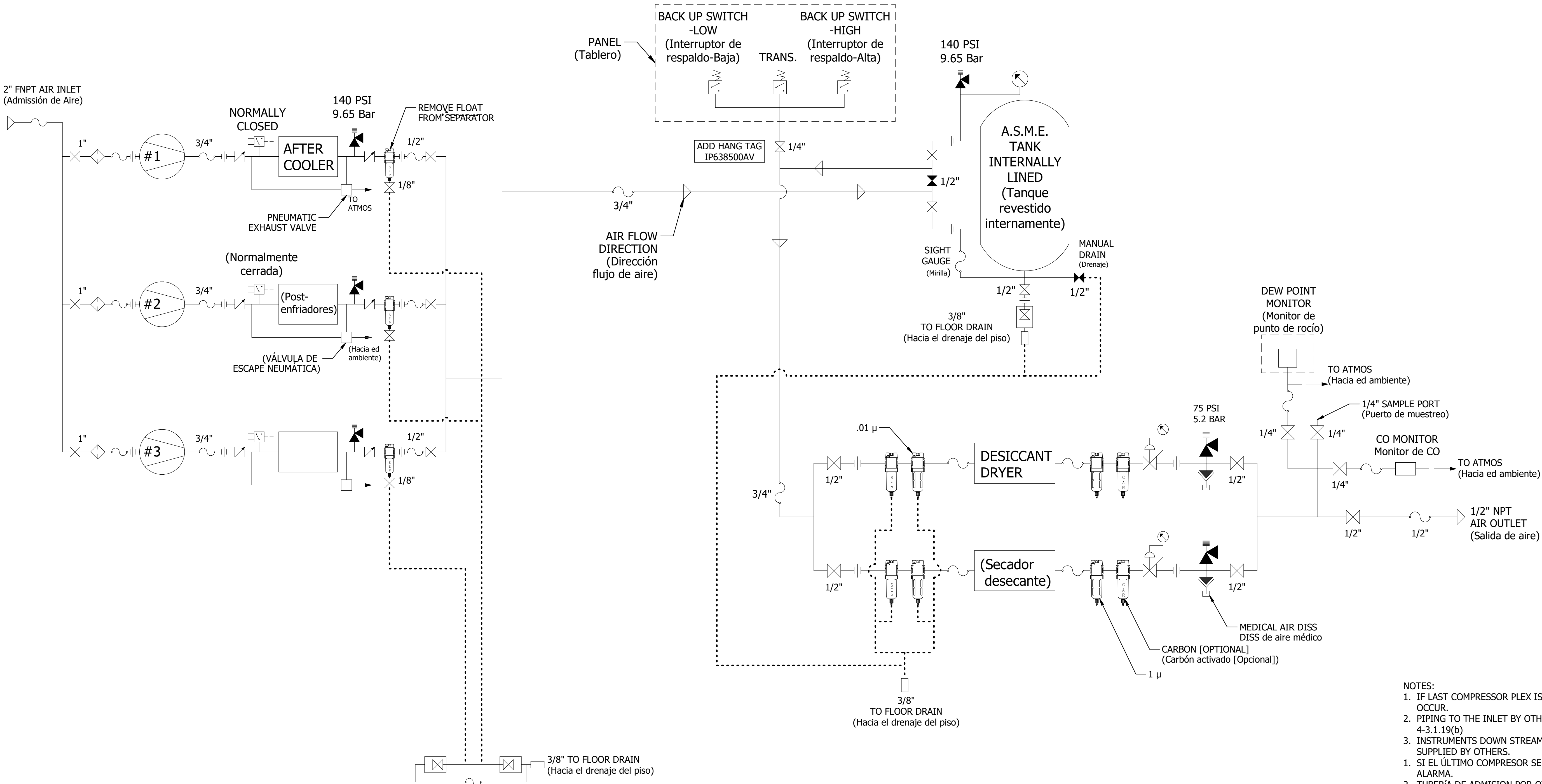

- NOTES:
- IF LAST COMPRESSOR PLEX IS ENERGIZED ALARM WILL OCCUR.
 - PIPING TO THE INLET BY OTHERS AND TO BE PER NFPA99 4-3.1.19(b)
 - INSTRUMENTS DOWN STREAM OF SOURCE VALVE TO BE SUPPLIED BY OTHERS.
 - SI EL ÚLTIMO COMPRESOR SE ACTIVA, SE PRODUCIRÁ UNA ALARMA.
 - TUBERÍA DE ADMISION POR OTROS Y CUMPLIR CON LA NFPA 99 4-3.1.19 (b).
 - ACCESORIOS AGUAS-ABAJO DE LA VALVULA DE CORTE DE SUMINISTRO SERAN INSTALADOS POR OTROS.

LEGEND (Leyenda)			
COMPRESSOR PUMP (Compresor de Aire)	AIR LINE (Tubería de Aire)	BALL VALVE (Válvula bola)	REGULATOR W/ GAUGE (Regulador con Manómetro)
INTAKE FILTER (Filtro admisión)	CONDENSATE LINE (Línea de condensado)	RELIEF VALVE (Válvula de seguridad)	TEMPERTURE SWITCH (Interruptor temperatura)
FILTER/SEPERATOR (Filtro/Seperator)	FLEX HOSE (Manguera flexible)	CHECK VALVE (Válvula Cheque)	PRESSURE SWITCH/TRANSDUCER (Interruptor/Transductor presión)
GAUGE (Manómetro)	UNION (Unión)	DEMAND VALVE (Válvula de demanda)	ELECTRIC AUTO DRAIN (Electroválvula de Drenaje)

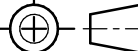SYMBOL LEGEND				DRAWINGS TO CONFORM TO CURRENT REVISION OF THE FOLLOWING AISC STANDARDS: Y14.3 MULTI AND SECTIONAL VIEW DWGS Y14.5 DIMENSIONING AND TOLERANCING	
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SOLID EDGE DRAWING		DO NOT SCALE DRAWING FOR DIMENSIONS	
0.XX ± .05		INCH [mm]		SHEET 2 OF 2	
0.XXX ± .005					
± 1		SCALE		1:1	
CONFIDENTIAL DISCLOSURE This drawing is the property of POWEREX INC. of MARSHON HOLDINGS, INC. and is subject to return on demand. Its contents are confidential and must not be copied or submitted to outside parties for use or examination.					
AUTHOR		REVISION DATE		APPROVALS ON FILE IN PLM	
Kumar,Sreehari		07/17/25			
ITEM ID: 761625					
MATERIAL: ---					
DESCRIPTION 7.5HP MED OPEN SCROLL TRIPLEX 200GAL DUPLEX DESICCANT					
DRAWING NUMBER		REVISION		SIZE	
MST07C5xP5		B		D	

